

- GB Pedal trainer**
- D Pedaltrainer**
- DK Pedaltræner**
- I Pedaliera**

Item no.
Art. Nr.
Varenr.
Codice

272002 & 272003

User manual



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
www.mobilex.dk

GB Pedal trainer - item no. 272002

Product description

Foldable pedal trainer with a 2-colored steel frame. The pedals have safety straps and the pedal resistance can be adjusted.

Safety requirements

- Make sure that this user manual is read by all persons using the device. Manufacturer don't take any responsibility for damages and/or injuries, caused by the fact that the user manual has not been followed.
- Only use the product in flawless condition.
- If defects or errors are detected you must immediately contact the dealer.
- Follow the information on the product label.
- Only use the product for the described purpose and only on even and flat surfaces.
- Do not stand on the pedal trainer.
- Use only sitting in a chair with the pedal trainer placed safely on the floor or by training of the arms, only placed safely on a surface of the right height.

Assembly

- Remove the device from the box and insert the adjustment knob.
- Turn the legs outwards until they both click in place.

Adjusting the pedalling resistance

The adjustment knob is for adjusting the resistance in the pedals. Turn the knob clockwise. Tighten or loosen as desired.

WARNING!

Device may get hot by extended use!

Cleaning & Maintenance

Normal dirt on metal and plastic parts can be removed with standard cleaning agents. Check the specific product information and use only commercial cleaning products which are suitable for cleaning and disinfection (no solvents or abrasives).

Guarantee terms

Mobilex A/S offers 2 years of guarantee for failures caused by errors in production. The guarantee is not valid by not-intended use of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the guarantee. In the event of damage, please notify your dealer. The guarantee does not cover transport cost. The guarantee does not cover injury or other damages eventually related to a malfunction of this product.

Technical data

Pedal trainer	Item no. 272002 & 03
Size (unfolded)	44 x 39,5 x 23 cm
Size (folded)	44 x 27 x 14 cm
Weight	2,16 kg (2,45 kg)
Max. load	100 kg

GB Pedal trainer - item no. 272003


Model with LCD Display

The 272003 model differs from the 272002 model on the additional multifunctional LCD display.



The display provides the following functions:

- 1. Mode** (red button). This control allows you to select a particular function. To start, press and hold the Red Button for 4 seconds. The LCD will display the different functions (after a few minutes without movement, the unit will automatically shut off).
- 2.** To select a function, wait until the 4 second setup is complete. Push the red button and the arrow will move through the functions. When the desired function is selected, simply use the pedal trainer and the unit will calculate

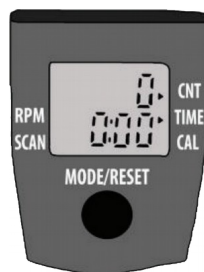

the exercise.

- 3. Time:** Determines the amount of the time the pedal trainer has been operating.
- 4. Counter (CNT):** Determines the amount of steps while operating the pedal trainer.
- 5. Calorie (CAL):** Determines the amount of calories burned while using the pedal trainer.
- 6. Reps per minute (RPM):** Automatically calculates the repetitions per minute.
- 7. Scan:** Will automatically show the results of all functions.

Battery replacement

If the display does not come on or reads incorrectly, the battery requires replacement.

To replace the battery, use a small screw driver and remove the display panel. Turn the display panel over and remove the watch-style battery. Insert a new battery and insert the display panel again.

D Pedaltrainer - Art. Nr. 272002

Produkt Beschreibung

Der Mobilex Pedaltrainer hat einen 2 farbigen Stahlrahmen. Die Pedale haben Sicherheits-schlaufen. Der Tretwiderstand ist einfach einstellbar.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand.
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Den Pedaltrainer nur auf geraden und ebenen Flächen verwenden.
- Belasten die das Gerät nicht mehr als mit dem zulässigen Gewicht und steigen Sie nicht auf das Gerät.

Montagehinweise

- Entfernen Sie das Gerät aus der Verpackung und montieren Sie den Einstellknopf.
- Klappen Sie die Standbeine nach außen bis diese in die Arretierung "einschnappen".

Tretwiderstand einstellen

Um den Tretwiderstand einzustellen verwenden Sie den Einstellknopf an der Oberseite des Pedaltrainers und drehen diesen im Uhrzeigersinn. Spannen oder lösen Sie den Einstellknopf bis Sie eine angenehme Widerstandseinstellung erreicht haben.

ACHTUNG! Der Pedaltrainer kann bei intensivem Gebrauch heiß werden!

Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit. Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

Technische Daten

Pedaltrainer	Art. Nr. 272002 & 03
Maße (aufgeklappt)	44 x 39,5 x 23 cm
Maße (zusammengeklappt)	44 x 27 x 14 cm
Gesamtgewicht	2,16 kg (2.45 kg)
Belastbarkeit	100 kg

D Pedaltrainer - Art. Nr. 272003

Modell mit LCD Display

Das Modell 272003 unterscheidet sich vom Modell 272002 durch das zusätzliche multifunktionale LCD Display.



Das Display bietet folgende Funktionen:

1. Mode (roter Knopf). Durch betätigen des roten Knopfes können Sie unterschiedliche Funktionen abrufen. Um zu starten halten Sie den Knopf für 4 Sekunden gedrückt. Das Display zeigt nun die verschiedenen Funktionen (ohne weitere Tätigkeit schaltet sich das Display nach ein paar Minuten ab).

2. Um eine Funktion auszuwählen warten Sie bis der 4 Sekunden Start abgeschlossen ist, dann drücken erneut kurz Sie auf den Knopf, der Pfeil am Display bewegt sich nun durch die Funktionen. Wenn Sie die gewünschte Funktion erreicht haben, starten Sie mit dem Treten, die Einheit beginnt nun mit der Berechnung.

3. Time: Zeigt die Dauer an, während der der Pedaltrainer benutzt wurde.

4. Counter (CNT): Zeigt die Menge der Pedaltritte.

5. Calorie (CAL): Bestimmt die Anzahl der Kalorien an die während des Tretens verbrannt werden.


6. Reps per Minute (RPM): Zählt die Wiederholungen pro Minute.

7. Scan: Zeigt das Ergebnis aller Funktionen an.

Austauschen der Batterie

Wenn keine Anzeige am Display erscheint oder die Anzeige schlecht lesbar ist muss die Batterie ausgetauscht werden.

Um die Batterie auszutauschen entfernen Sie mit einem kleinen Schraubenzieher die Abdeckung vom Display. Drehen Sie die Abdeckung um und tauschen Sie die Batterie (Uhren-Batterie) aus. Befestigen Sie anschließend die Abdeckung wieder.

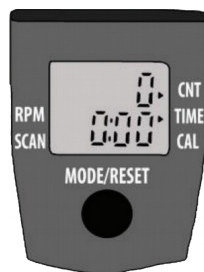

DK Pedaltræner - varenr. 272002

Produktbeskrivelse

Pedaltræner med 2-farvet stålramme. Pedalerne har sikkerhedsbøjler og trædemodstanden kan indstilles.

Sikkerhedsanvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri stand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet, skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Pedaltræneren må kun bruges på flade og jævne overflader.
- Stå ikke på pedaltræneren.
- Anvendes kun siddende i en stol med pedaltræneren sikkert anbragt på gulvet, eller ved træning af arme; sikkert anbragt på et bord i passende højde.

Montagebeskrivelse

- Tag apparatet ud af pakken og monter indstillingsknappen.
- Fold støttebenene ud og fra hinanden indtil de klikker på plads. Gentages for begge støtteben.

Indstilling af trædemodstand

Indstillingsknappen bruges til at indstille modstanden i trædepedalerne. Knappen drejes mod uret. Spændes eller løsnes som ønsket.

OBS! Produktet kan blive varmt ved intensiv brug!

Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud opvredet i mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler, og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktionsændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S.

Garantien omfatter ikke erstatning for skader der skyldes, at denne brugervejledning ikke følges.

Tekniske data

Pedaltræner	Varenr. 272002 & 03
Mål i udfoldet stand	44 x 39,5 x 23 cm
Mål sammenklappet	44 x 27 x 14 cm
Vægt	2,16 kg (2,45 kg)
Max. belastning	100 kg

DK Pedaltræner - varenr. 272003

Model with LCD display

272003 modellen adskiller sig fra 272002 modellen ved det ekstra multifunktionelle LCD display.



Displayet har følgende funktioner:

1. Mode (rød knap): Denne knap gør det muligt at vælge en bestemt funktion. For at starte skal du holde den røde knap inde i 4 sekunder. Displayet viser de forskellige funktioner (efter et par minutter uden bevægelse, vil enheden automatisk slukke).

2. For at vælge en funktion, vent, indtil de fire sekunders start er færdig og tryk på den røde knap igen, og pilen på displayet vil bevæge sig igennem funktionerne. Når den ønskede funktion er valgt, begynd så at træde, og enheden vil

beregne øvelsen.

3. Time: Beregner den tid pedaltræneren har været i drift.

4. Counter (CNT): Beregner antal omdrejninger, mens du bruger pedaltræneren.

5. Calorie (CAL): Beregner antal forbrændte kalorier, mens du bruger pedaltræneren.

6. Reps per minute (RPM): Beregner automatisk gentagelser per minut.

7. Scan: Viser automatisk resultaterne af alle funktioner.

Udskiftning af batteri

Hvis displayet ikke tændes eller er svært at læse, skal batteriet udskiftes.

For at udskifte batteriet, skal du bruge en lille skruetrækker til at fjerne skærmpanelet. Vend skærmpanelet om og fjern urbatteriet. Sæt et nyt batteri i og isæt skærmpanelet.

I Pedaliera - codice 270002

Descrizione del prodotto

Pedaliera con telaio in acciaio a due colori. I pedali sono dotate di fasce ferma-piedi ed la resistenza alla pedalata è regolabile.

Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo in perfetto stato.
- prima dell'uso controllate il prodotto e se presentasse un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia.
- annotare le note sull'etichetta del prodotto.
- utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ogni altro uso non è consentito.
- usate la pedaliera solo su superfici piane e stando seduti su una sedia o poltrona.
- non caricate il prodotto con pesi superiori alla portata consentita (vedi dati tecnici ed etichetta del prodotto).
- non montare in piedi sulla pedaliera.

Assemblaggio

- Estraiete la pedaliera dall'imballo e montate il pomello di regolazione.
- Aprite i due supporti d'appoggio su ambo i lati fino a sentire un leggero "click" del pulsante di bloccaggio.

Regolazione della resistenza alla pedalata

Girare il pomello di regolazione in senso orario per aumentare la resistenza alla pedalata, ed in senso antiorario per diminuire la resistenza.

ATTENZIONE! Con un uso prolungato il dispositivo potrebbe surriscaldarsi!

Manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

La garanzia non include i danni per il mancato uso in caso di riparazione o prevede risarcimenti per danni causati dalla mancata lettura o osservanza di questo manuale.

Dati tecnici

Pedaliera	Cod. 272002 & 03
Dimensioni (aperto)	44 x 39,5 x 23 cm
Dimensioni (chiuso)	44 x 27 x 14 cm
Peso totale	2,16 kg (2,45 kg)
Portata max.	100 kg

I Pedaliera - codice 270003

Modello con display LCD

Il modello 272003 di differenza dal modello 272002 solo con il display LCD in più.



Il display offre le seguenti funzioni:

1. Mode (bottone rosso). Il pulsante permette di selezionare una particolare funzione. Per iniziare, tenere premuto il pulsante rosso per 4 secondi. Il display LCD visualizzerà le diverse funzioni (dopo qualche minuto senza movimento, l'unità si spegne automaticamente).

2. Per selezionare una funzione, attendere che il set up dei 4 secondi sia completato. Premere nuovamente il pulsante rosso e la freccia sul display si muoverà attraverso le varie funzioni. Per selezionare la funzione desiderata è sufficiente iniziare a pedalare e l'unità calcolerà l'esercizio.

3. Time: Determina la durata dell'esercizio.

4. Counter (CNT): Determina la quantità di pedalate durante l'esercizio.

5. Calorie (CAL): Determina la quantità di calorie bruciate durante l'utilizzo della pedaliera.


6. Reps per minute (RPM): Calcola le ripetizioni al minuto.

7. Scan: Passerà in rassegna automaticamente i risultati di tutte le funzioni.

Sostituzione della batteria

Se il display non si accende o è scarsamente leggibile, la batteria deve essere sostituita.

Per sostituire la batteria, utilizzate un piccolo cacciavite per rimuovere il pannello di visualizzazione. Girate il pannello e rimuovete la batteria. Inserire una nuova batteria e rimettere il pannello sull'unità.

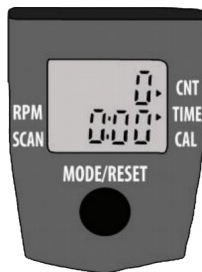

Guarantee terms

Mobilex A/S offers 2 years of warranty for damages caused by errors in production or material errors. The warranty is not valid by not-intended repair or usage of the product. Parts subject to normal wear are not covered by the warranty, unless wear is caused by a manufacturing fault. If product changes are made without our written acceptance the CE-marking and product warranty will not be valid. In the event of product damages covered by this warranty, please notify your dealer or Mobilex A/S directly. The warranty does not cover transport costs and does not include compensation for personal injuries or non-use of the product during repair. The warranty does not cover damages due to the user manual not being followed.

Declaration of Conformity (CE)


The company Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, declares that the



are designed in accordance with the technical documentation and made of which conforms to the following basic requirements:


- **EU Council Directive 93/42/EEC for medical equipment**

Lars Nygaard
Managing Director
Mobilex A/S

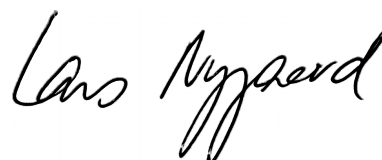

.....
signature

Skanderborg, 1/2-2017

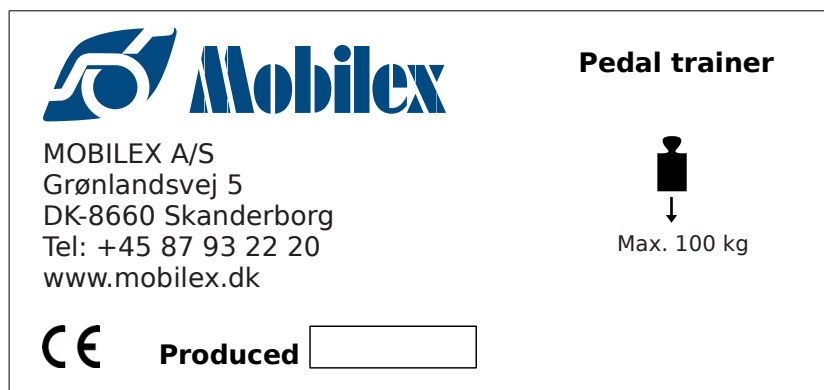

Example of the product label