

"Kakadu" bad og toiletstol i aluminium



OY1. Toilet-badestolen er standard udstyret med 4 stk låsbare 5" hjul



OY2. Toilet-badestolen monteret op med 24" hjul

Toiletstolen er fremstillet i pulverlakeret aluminium og bliver standard leveret med 5" låsbare hjul. Sæde, ryg og de klapbare armlæn er belagt med blød PUR for god komfort. Benstøtterne er højdejustbare og kan let afmonteres. Leveres komplet med spand og låg.

Teknisk data	Small 302015	Standard 302018	Large 302019	XL 302020	Tilt 302024	Tilt L 302025	Diff. med 24"
Sædebredde	38 cm	45 cm	50 cm	55 cm	45 cm	50 cm	---
Sæddedybde	38 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	---
Sædehøjde (indstillelig)	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	50 - 55 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm	---
Frihøjde	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	42 - 47 cm	---	---	---
Gennemfarts bredde	29 cm	35 cm	40 cm	45 cm	---	---	---
Totalbredde	49 cm	56 cm	61 cm	66 cm	56 cm	61 cm	+ 8 cm *
Totaldybde	85 cm	93 cm	93 cm	93 cm	110-120 cm	110-120 cm	+ 5 cm
Totalhøjde (indstillelig)	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	96-101 cm	97-141 cm	97-141 cm	---
Max. belastning	130 Kg	150 Kg	150 Kg	200 kg	130 Kg	130 Kg	---
Vægt	11,00 Kg	12,90 Kg	13,50 Kg	14,10 kg	15,10 kg	15,70 kg	+ 2,90 kg
Kipvinkel (Tilt)	---	---	---	---	-5° bis +25°	-5° bis +25°	---

* Forøget totalbreddeforskel for Kakadu Tilt (302024 eller 302025): +14 cm

"Kakadu Tilt" Bad og toiletstol vinkelindstillelig



OY3. "Kakadu Tilt" Bad- og toiletstol vinkel indstillelig



OY4. Bad- og toiletstol "Kakadu Tilt" i vinklet tilstand

Bad og toiletstolen med tilt kan vinkles fra -5° til $+25^{\circ}$. Specialhovedstøtten med udskæring til ørene kan indstilles i højden, dybden og i den ønskede vinkel. Fodpladerne kan indstilles i vinklen samt i højden. Som standard leveres badestolen med 5" låsbare hjul

Den sorte polstring er ligesom hovedstøtten belagt med blødt PUR.

Til bad- og toiletstolen kan der leveres 24" hjul, det medfølgende montagesæt indeholder alle nødvendige dele.

Tilbehør til bad og toiletstole

Til bad- og toiletstole i "Kakadu" serien kan leveres forskelligt tilbehør



OY5. Amputationsstøtte




OY6. Sikkerhedsbøjle



OY7. Antitip (kun til version med 24" hjul)



OY8. Sæde med rundt hul

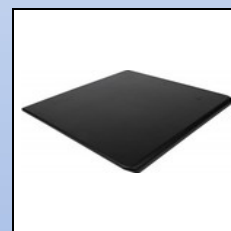

OY9. Sædeafdækning for sæde med rundt hul